

AIRFLOW[®] ONE

PREȚ **6.607,10€***

**CARD CADOU ÎN
VALOARE DE 330€**

AIRFLOW[®] ONE

este cea mai recentă
inovație a EMS pentru
tratamentul ghidat al
plăcii bacteriene „Guided
Biofilm Therapy” destinată
clinicienilor care folosesc
deja un modul PIEZON[®]
NO PAIN în clinica lor
stomatologică.

AIRFLOW
ONE



THE SWISS ORIGINAL.

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

Originalul de la Inventator. Precizie garantată elvețiană și design superb. Performanță, fiabilitate și know-how. Experți în profilaxie din 1981.



STAȚIA GBT PROPHYLAXIS

AIRFLOW® Prophylaxis Master, fabricat în Elveția, a fost dezvoltat la Centrul de Cercetare EMS cu peste 100.000 de ore de testare tehnică și clinică, în colaborare cu profesioniști stomatologi de top din întreaga lume.

Cart-ul nu este inclus în preț și poate fi cumpărat separat.

THE SWISS MASTER.



AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

CARD CADOU ÎN
VALOARE DE 500€

PREȚ 8.392,80€*



Ofertă valabilă în perioada 10 aprilie - 10 iulie 2022

*Prețuri fără TVA

► ESTE SOLUȚIA SISTEMATICĂ, PREDICTIBILĂ PENTRU GESTIONAREA PLĂCII BACTERIENE ORALE ÎN PROFILAXIA PROFESIONALĂ, FOLOSIND TEHNOLOGII DE ULTIMĂ GENERAȚIE AIRFLOW®, PERIOFLOW® ȘI PIEZON®. ESTE DOVEDITĂ PRIN EVIDENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ.

08 RECALL

PACIENT SĂNĂTOS = PACIENT FERICIT

- Programați următoarele sedințe (recall-uri) în funcție de evaluarea riscului
- Întrebați-l pe pacient dacă i-a plăcut tratamentul

07 VERIFICAȚI

FACEȚI-VĂ PACIENTUL SĂ ZĂMBEASCĂ

- Efectuați o verificare finală pentru placa bacteriană rămasă
- Asigurați-vă că tartrul este complet eliminat
 - Diagnosticați cu precizie cariile
 - Protejați cu fluor
 - Nu mai este nevoie să lustruiți

06 PIEZON® PS

ÎNDEPĂRȚAȚI TARTRUL RĂMAS

- Utilizați instrumentul minim invaziv EMS PIEZON® PS supra și subgingival până la 10 mm ► Curățați pungile parodontale >10 mm cu mini chiurete
- Utilizați instrumentul EMS PIEZON® PI în jurul implantelor până la 3 mm subgingival și pe restaurări

05 PERIOFLOW®

ÎNDEPĂRȚAȚI PLACA BACTERIANĂ DIN PUNGILE PARODONTALE > 4 LA 9 MM

- Utilizați pudra AIRFLOW® PLUS pe dinții naturali în pungile parodontale adânci și furcații radiculare și pe implanturi
- Utilizați noul vârf, mai subțire PERIOFLOW®

01 EVALUAREA ȘI CONTROLUL INFECȚIEI

EVALUAȚI FIECARE CAZ CLINIC ȘI IMPLEMENTAȚI MĂSURI DE IGIENĂ

- Începeți prin clătirea cu apă de gură BacterX® Pro ► Examinați dinții, gingia și țesuturile parodontale ► Examinați implanturile și țesuturile peri-implant

02 EVIDENȚIAȚI

FACEȚI VIZIBILĂ PLACA BACTERIANĂ

- Arătați pacienților placa bacteriană evidențiată și zonele lor problematice cu ajutorul EMS Biofilm Discloser ► Colorarea vă va ghida în îndepărtarea plăcii bacteriene ► Odată ce placa bacteriană este îndepărtată, tartrul este mai ușor de detectat

03 MOTIVAȚI


CREȘTEȚI CONȘTIENTIZAREA ȘI EDUCAȚI PACIENȚII

- Subliniați rolul prevenției ► Instruiți-vă pacienții cu privire la igiena orală ► EMS recomandă periute interdentare sau ață dentară ca și periute electrice sau manuale și pastă AIRFLOW® pe bază de eritritol pentru îngrijirea zilnică de acasă

04 AIRFLOW® MAX

ÎNDEPĂRȚAȚI PLACA BACTERIANĂ, PETELE ȘI TARTRUL ÎNCIPIENT

- Utilizați AIRFLOW® MAX pe dinți naturali, restaurări și implanturi ► Îndepărtați placa bacteriană supra și subgingival până la 4 mm folosind pudra AIRFLOW® PLUS 14 μm ► De asemenea, îndepărtați placa bacteriană de pe gingie, limbă și palat ► Îndepărtați petele rămase pe smalț folosind pudra AIRFLOW® CLASSIC Comfort

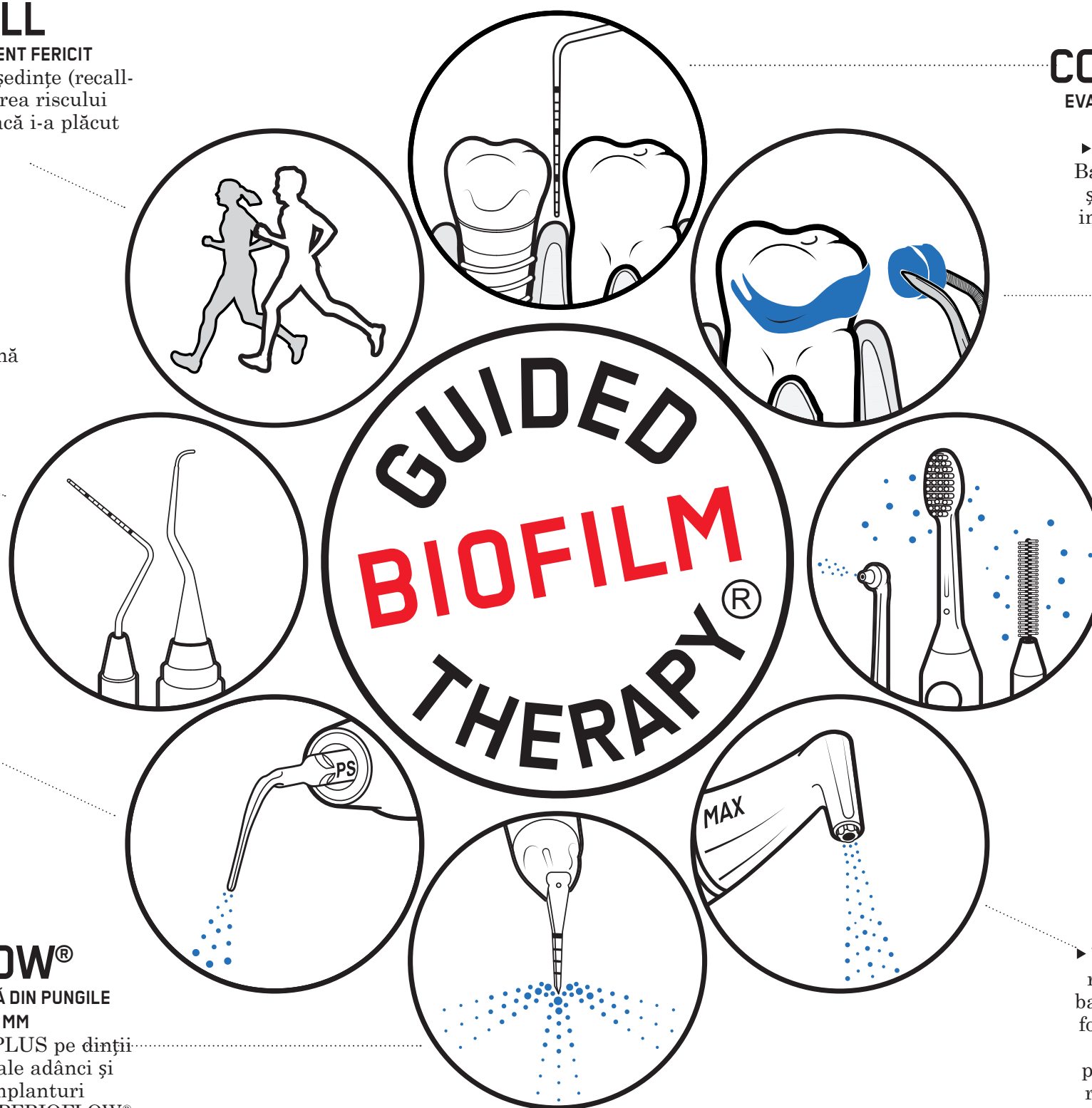



► Tehnologia PIEZON® este o piatră de temelie a acestui protocol GBT. Clinicienii care au fost obișnuiți inițial cu utilizarea exclusivă a instrumentelor de mână și descoperă tehnologia GBT și EMS PIEZON® sunt uimiți de rezultate, eficiență și conformitate atunci când ambele sunt combinate. Minim invaziv, tratamentul oferă cel mai înalt nivel de confort, siguranță și eficiență.

AIRFLOW® HANDY PENTRU CABINETUL DVS

- ▶ AIRFLOW® Handy este soluția entry-level pentru tratamentele AIRFLOW®. Proiectat pentru utilizare ocazională, precum și pentru practicienii care folosesc AIRFLOW® pe mai multe unități. Vă recomandăm curățarea profesională cu unitățile noastre.
- ▶ Gamă completă de aplicații AIRFLOW®.

HANDY PENTRU PLUS

2 piese de mână disponibile

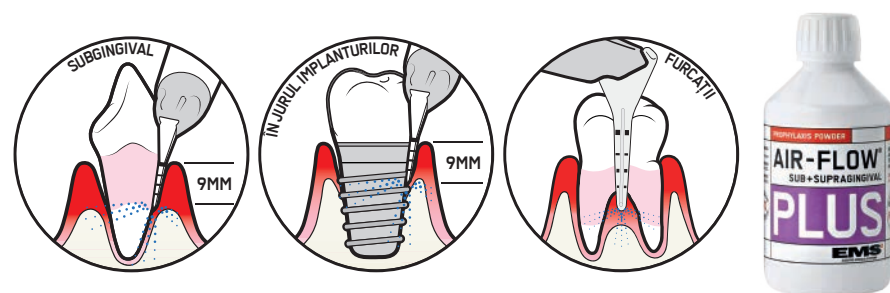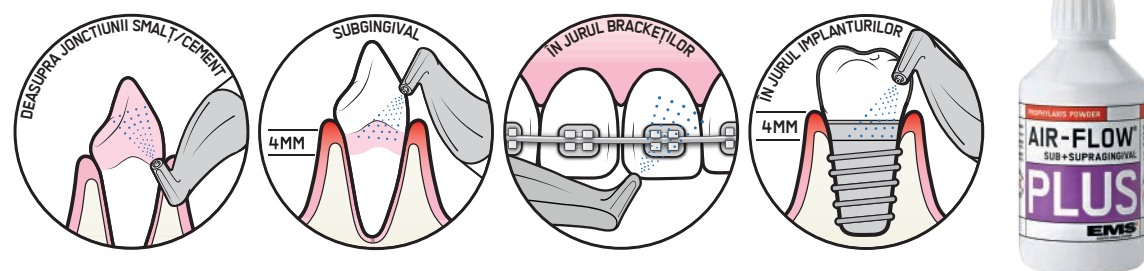

HANDY PENTRU CLASSIC



TRATAMENT ORIGINAL AIR-FLOW® CU UN NOU STANDARD DE EFICIENȚĂ ȘI FLEXIBILITATE, ERGONOMIE ȘI DESIGN → CU AIR-FLOW® HANDY 3.0 PREMIUM



PREȚ 1.757,60€*

CARD CADOU ÎN VALOARE DE 100€



CARD CADOU ÎN VALOARE DE 80€

PREȚ 1.237,60€*

Înregistrați-vă achiziția pentru a vă primi cadoul.



CALITATEA ELVEȚIANĂ ÎN TEHNOLOGIA CU ULTRASUNETE → **PIEZON[®] 250 Led[®]**



PREȚ **2.069€***



reddot design award

**"I FEEL
GOOD"**

Sticlă cu conectare rapidă
350 și 500ml

Gestionarea
ușoară a
puterii.

Instrumente originale
EMS Swiss Instruments
cu cheie CombiTorque[®]

Piesa
Originală
Piezon[®] LED

Suport ergonomic
pentru piesa de
mână.

Furtun pentru
piesa de mână
cu conectori
ușor de montat

Capac cu clips
al pompei
peristaltice

Regulator de debit de
lichid cu capacitate de
funcționare uscată

Indicator de putere
medie pentru
tratamentul
parodontal

Indicarea
modului
Perio

Indicator de
putere cu LED

Cu 20% mai puternic
și mai silențios decât
modelele anterioare,
datorită noii
tehnologii.

Tehnologie
originală
EMS Piezon[®]

*Înregistrați-vă achiziția
pentru a vă primi cadoul.*

